

# MassHunter 定量工具"浏览"报错 QuantAnalysisWPF

## 遇到了问题，需要关闭

黄河

(四川省化工质量安全检测研究院, 四川 成都 610031)

**摘要:** 解决 MassHunter10.0 软件中定量工具 QuantAnalysis 浏览报错问题的过程。

**关键词:** MassHunter10.0; QuantAnalysis

### 1 发现问题

在实验室一台闲置电脑上安装了 MH10.0 软件，安装过程还好，没抽疯。但是在使用定量工具 QuantAnalysis，新建定量，点浏览时，就会报错，提示遇到问题需要关闭。然后点确定，它真的关闭了。而如果不点“浏览”，通过剪头来打开路径，又没问题且所有操作都正常。如图 1，如图 2



图 1 定量工具错误

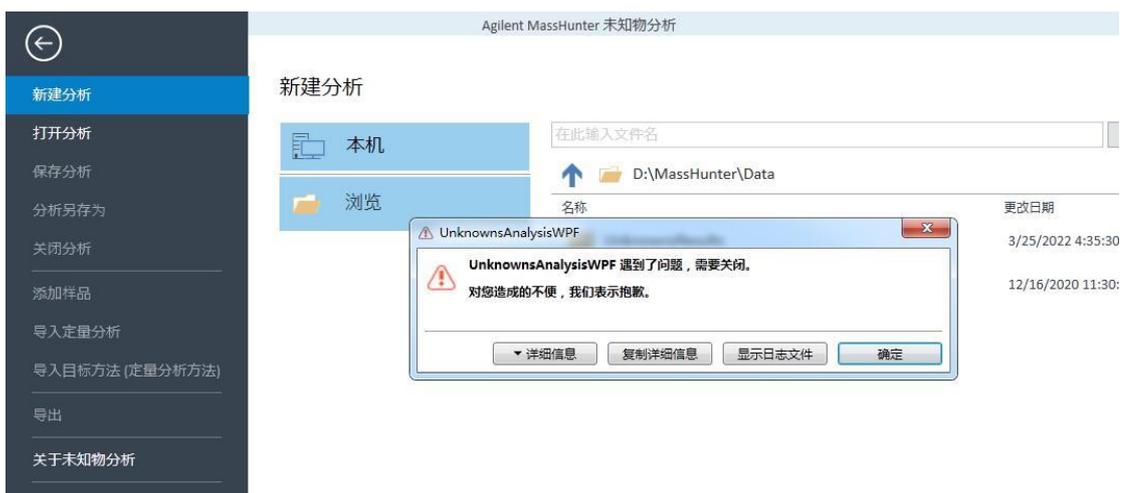


图 2 未知物分析工具错误

这问题在另一台原来装的 MH7.0, 更新到 10.0 的电脑上也出现了, 定性软件则正常。最后不得不装回定量 7.0, 采集和定性使用 10.0。

## 2 解决问题

打开详细信息, 发现是报"QuantCustomDialogs64.dll"这个 dll 文件错误, 被拒绝加载。以为是缺少这个文件, 可是在电脑的"C:\Windows\System32", 路径下又有这个文件, 如图 3。不知道是否没注册成功, 那试着注册一下。可是又抽疯了, dll 注册失败, 如图 4。

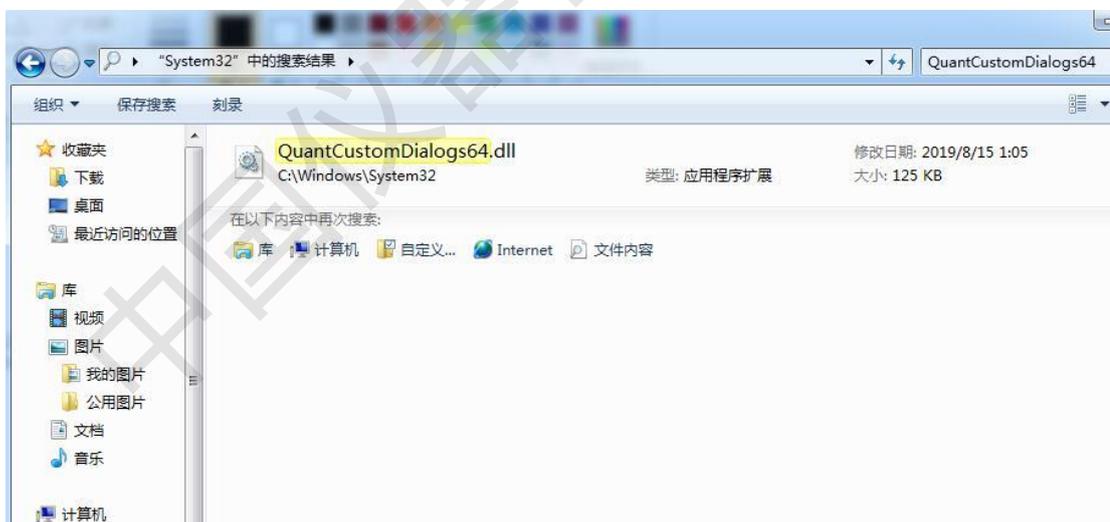


图 3



图 4

好吧，自己搞不定就咨询安捷伦工程师吧，小程序联系工程师，工程师确认电脑没有杀毒软件，防火墙已关闭后，让重置用户配置。工具在开始菜单的 Agilent/MassHunterWorkStation/定量分析工具下面，如图 5



图 5

可是，重置配置后，还是一样的报错。此时工程师估计在思考解决办法，我也在思考。再次点开报错的详细信息。看到了主程序所在路径，如图 6。那就顺藤摸瓜，摸到了这个叫 Agilent.MassHunter.Quantitative.QuantWPF.exe 的应用程序。



图 6

这时候我感觉我可能摸对瓜了，右击这个程序，在兼容性下选中“以管理员方式运行”，如图 7。然后确定，再打开软件，哇哦，可以了。如图 8

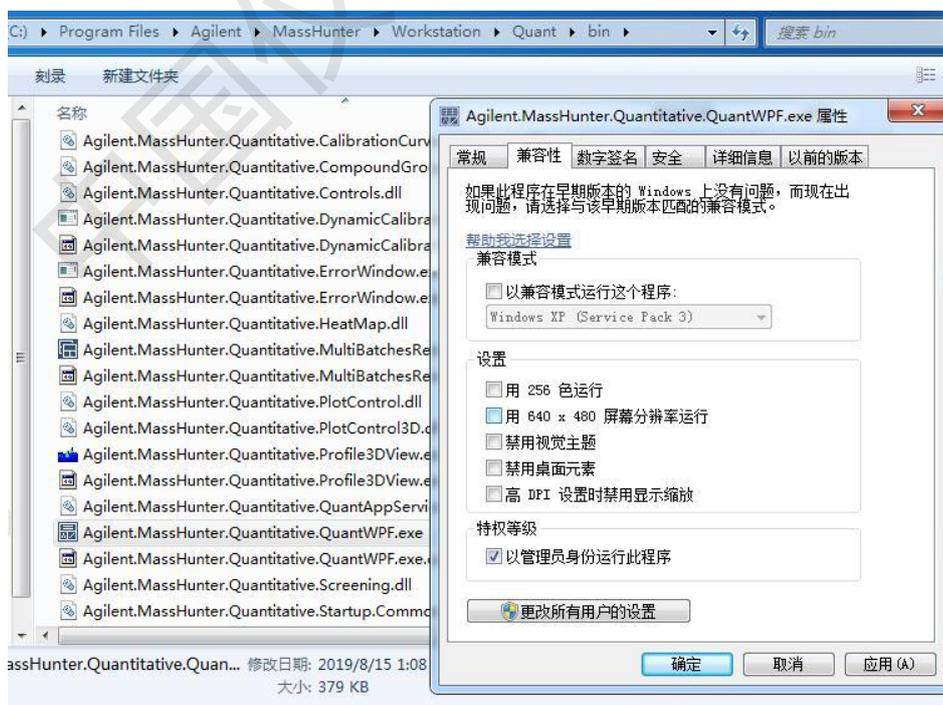


图 7

## 新建批处理

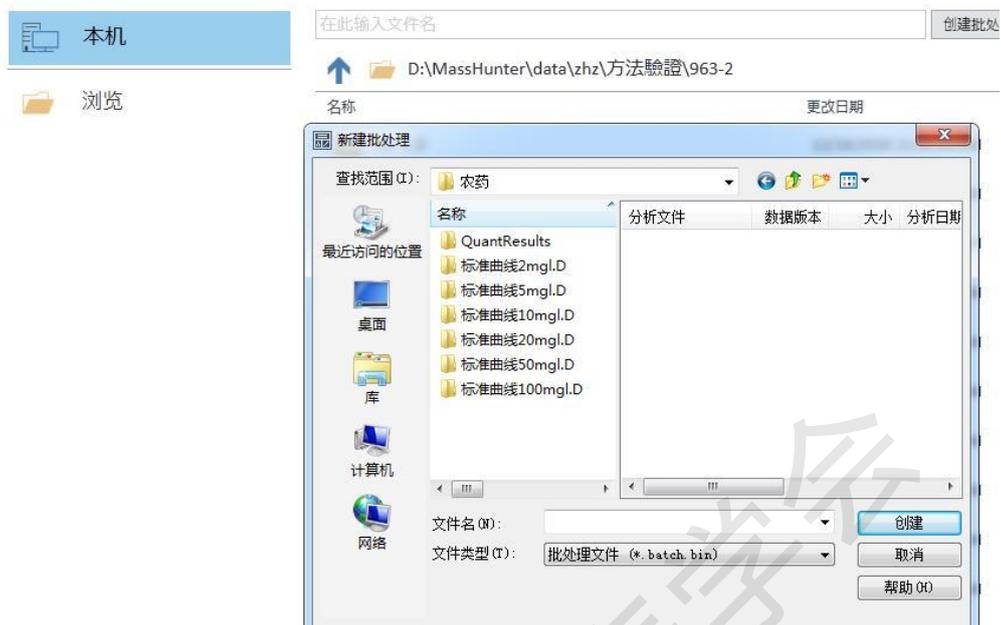


图 8

## 3 结果

然后呢，照着葫芦画瓢，把未知物分析也设置为管理员反式运行，也搞定了。