

岛津气相色谱工作站批量打印报告、批量导出 PDF 格式的报告

阚士超

(新泰市检验检测中心, 山东 泰安 271200)

样品跑完, 数据算完, 都要打印纸质的样品数据报告, 如果只有几个样品, 可以挨个手动打印数据报告。如果有十几个或者几十个样品, 挨个打印纸质报告, 效率就太低了。


岛津气相色谱工作站有一个功能是批处理再解析, 批处理再解析可以批量对数据文件进行处理。这篇文章 (<https://bbs.instrument.com.cn/topic/8248252>) 介绍了批处理再解析快速处理数据的功能。其实批处理再解析还有一个功能就是批量打印报告。



	数据文件	级别号	输出报告	报告格式文件
l. gcm	百菌清0.1-7. ged	1	<input type="checkbox"/>	lutions\System\DEFAULT. lsr
l. gcm	百菌清0.1-2. ged	1	<input type="checkbox"/>	lutions\System\DEFAULT. lsr
l. gcm	百菌清0.1-3. ged	1	<input type="checkbox"/>	lutions\System\DEFAULT. lsr
l. gcm	百菌清0.1-4. ged	1	<input type="checkbox"/>	lutions\System\DEFAULT. lsr
l. gcm	百菌清0.1-5. ged	1	<input type="checkbox"/>	lutions\System\DEFAULT. lsr
l. gcm	百菌清0.1-6. ged	1	<input type="checkbox"/>	lutions\System\DEFAULT. lsr

首先打开“批处理再解析”, 然后打开批处理文件, 选择报告对应的报告格式文件, 再勾选批处理序列中的“输出报告”功能。这时候保存批处理, 再点击“再解析”, 这时候就会把批处理里面的数据文件对应的纸质报告打印出来。

批处理再解析功能还可以批量输出 PDF 格式的数据报告, 首先设置打印机, 将对应的打印机修改为虚拟打印机。岛津气相色谱工作站软件安装的时候自动安装了虚拟主机打印机, 就是 SkyPDF Pro Driver。如果没有 SkyPDF Pro Driver, 可以安装 Wps, 使用 Wps 的虚拟打印机功能效果要差一些, 需要挨个手动保存 PDF。

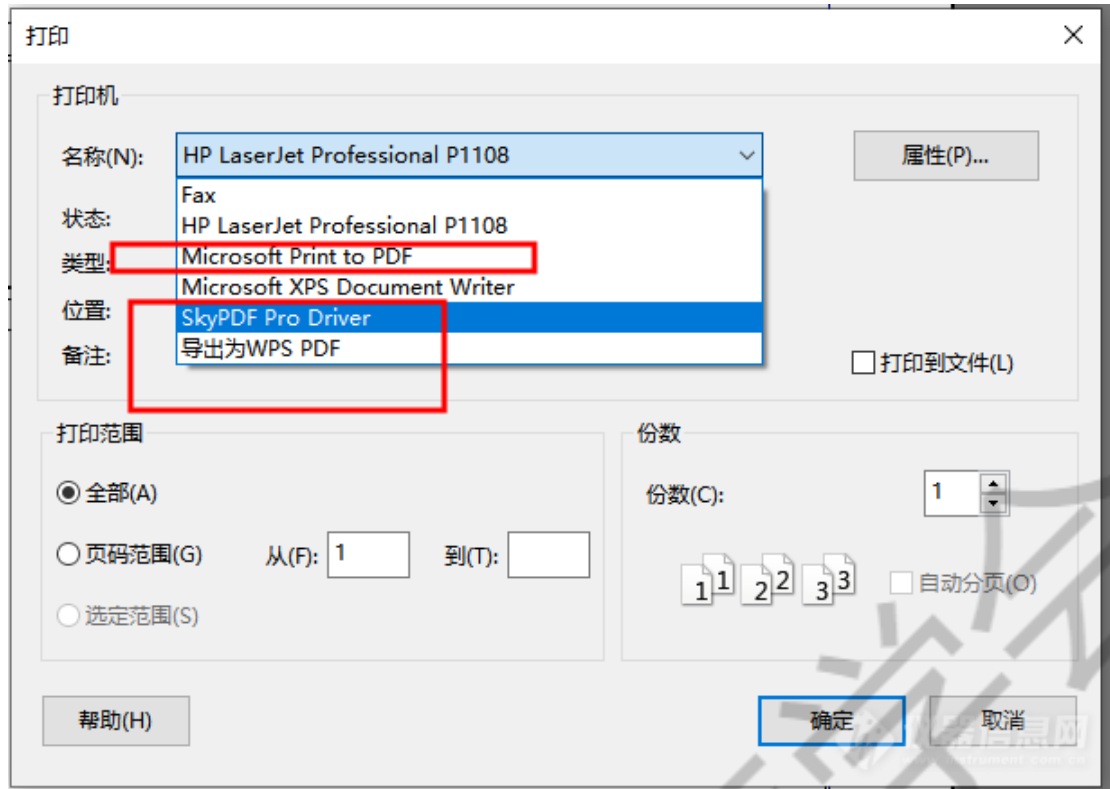

如图选择“SkyPDF Pro Driver”，这时候再启用正常使用批处理再解析功能就可以了。